


# 真空烘箱 Vacuum Drying Oven

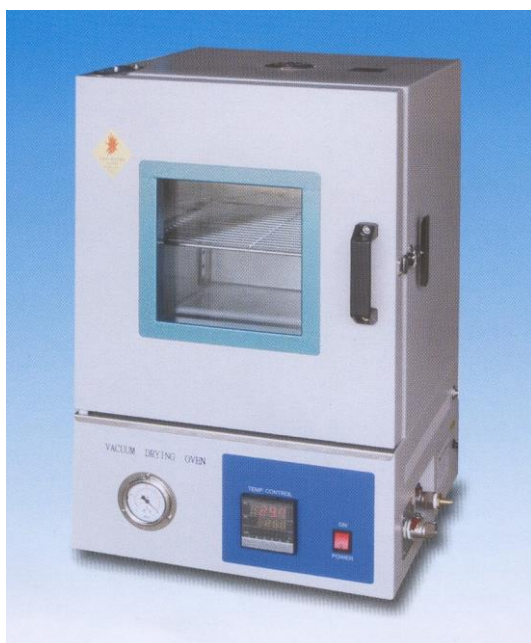

**規格說明：**(無送風馬達及真空幫浦需另購)

溫度範圍：室溫 40°C~200°C

溫度控制器：微電腦 P.I.D.自動演算功能

溫度表示方式：觸控方式，LED 數字顯示

溫度穩定度：±0.1°C

溫度設定方式：觸控方式，LED 數字顯示

溫度測溫體：K(電熱偶)

內、外箱材質：內箱 SUS 304 不鏽鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆

觀測窗：耐高壓；高溫安全強化玻璃

真空度計：範圍 0~760mmHg

斷熱材料：岩棉保溫、效果佳

安全裝置：自我診斷功能、溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關

門沿迫緊：耐高溫矽膠、不變形、氣密性佳

附 件：棚板均附 2 片

型式	容積	內部尺寸 WxDxH	外部尺寸 WxDxH	電壓	電流
JOV-20	8 L	20*20*20cm	48*38*38cm	110V/220V	現場實測
JOV-30	27 L	30*30*30cm	45*45*70cm	110V/220V	8A/5A
JOV-40	64 L	40*40*40cm	60*55*85cm	110V/220V	15A/8A
JOV-60	150 L	60*50*50cm	85*70*105cm	220V	17A

※ 型號 JOV-60 有附輪子，JOV-20、JOV-30、JOV-40 則無輪子。

※ 特性：溫度準確、耐用、外型美觀、真空度保持佳功能多、操作簡單。

※ 註明：接受各種尺寸大小訂製。