

旋轉混合器 Rotating Mixer



LM-80T / LM-80S



VM-80

LM-80 滾軸混合器用於混合樣品，粘性物質和固液懸浮物等，滾動和搖擺兩種模式提供高效和安全的混合，適用於預防樣品凝固，免疫沈澱等相似應用。

規格說明：

產品型號	LM-80T	LM-80S
運動方式	滾動和搖擺	同心滾動
振幅	25mm	—
轉速範圍	10 ~ 80 rpm	
滾軸根數/長度	6 支 / 280 mm	
功率	25 w	
重量	4.5Kg	
電壓	AC100~240V	
產品尺寸	450×260×120mm	

VM-80 垂直旋轉混合器提供高效且溫和的混合，保持生物樣品處於懸浮狀態，如組織液混合。適用於預防樣品凝固、乳膠診斷、免疫沈澱等應用。

規格說明：

產品型號	VM-80
運動方式	垂直圓周運轉
轉速範圍	10 ~ 80 rpm
功率	10 w
重量	2.8Kg
電壓	AC100~240V
產品尺寸	470×190 ×160mm
選配夾具	1.5mlx 64 / 15mlx22 / 50mlx16 三選一

旋轉混合器 Rotating Mixer



YM-80 旋轉培養混合器用於樣品的組織培養，萃取，測定沈降率，如：組織液混合、放射免疫、葡萄糖、蛋白質、DNA、細胞、尿液、酶等化學分析，在生化、生物、細胞、免疫、化學、動植物分析、臨床實驗等多方面都有廣泛應用。其主要特點是能夠勻速地長時間連續混合，它便於操作，轉盤的傾斜度可任意調節。它還可根據需要放置在恒溫箱內。

產品特點

1. LED 定時時間及轉速顯示。
2. 多種離心管夾具可選，適用 1.5-50ml 微量管。
3. 可調混合角度：0 ~ 90 度。
4. 設有定時功能，0 ~ 9999 分鐘範圍內設定時間，螢幕顯示剩餘時間，結束時發出警示聲提示。
5. 直流無刷電機驅動、速度精確，壽命長、免保養。


規格說明：

轉速範圍	10~80rpm
最時範圍	0 ~ 9999min
傾斜角度範圍	0 度 ~ 90 度
溫度限制	< 65°C (乾燥空氣)
功率	35w
重量	4.5Kg
電壓	AC85~265V
產品尺寸	220×236×246mm

選購托盤配件(隨機三選一)：

A	50ml 尖底管：10 個	
B	15ml 尖底管：18 個	
C	1.5ml 離心管：64 個	

旋轉混合器 Rotating Mixer

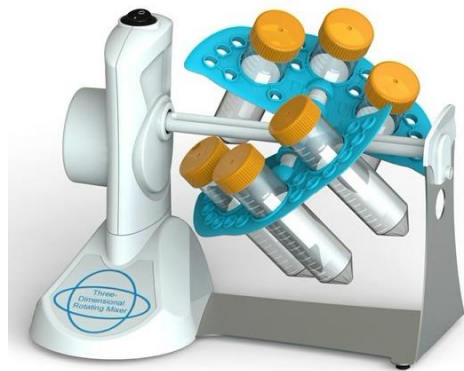

NM-18



NM-40

NM-18/ NM-40 3D 旋轉混合儀是一款設計獨特的儀器。可通過水平、垂直或任意角度的旋轉對各種樣品管內的樣品進行混合。通過對旋轉面板的調整，可以使產品水平或垂直或介於兩者之間的角度旋轉，廣泛應用於分子雜交、生物組織液等需要混合的樣品，旋轉速度溫和，位於旋轉面板上的四個夾具可單獨調整，這樣就一次混合中可以有四種不同的方式。儀器精巧、方便，可以很容易地轉移到其他地方。實驗台、冷庫或者培養箱中，儀器的外殼和面板都採用了專業的設計，方便清潔及除污。


產品特點

1. 獨有的可調旋轉架組合。
2. 多種旋轉方式，從溫和旋轉到翻跟斗式旋轉。
3. 廣泛應用於生物分子學，組織化學、生物化學等。
4. 提供五種離心夾具，極大的滿足了實驗需求。
5. 旋轉時，用手輕按旋轉夾具，可實現正反旋轉。
6. 可用於冷庫和培養箱。

規格說明：

產品型號	NM-18	NM-40
轉速	18rpm	10~40rpm
定時範圍	無	1s~999min
功率	4w	
重量	1Kg	1.2Kg
電壓	220V/110V	AC100~230V
產品尺寸	240×145×210mm	

標準配置：

A	5x(Φ 15mm-Φ 16mm)可用 10ml/15ml 離心管 6x(Φ 12mm-Φ 13mm)可用 5ml/7ml 離心管	
B	3x50ml 離心管+18 x0.5ml 離心管	
C	18 x1.5ml/2.0ml 離心管	

震盪器 Shaker

ChromTech® 震盪器特點

- 有旋轉震盪、水平震盪、周轉震盪及翹板震盪等多種震盪器。
- 速度可無段式調節；有定時和連續兩種工作方式。
- 在定時工作方式時定時時間可由 3 分鐘到 90 分鐘任意設定。
- 震盪器外殼由耐高溫、抗酸鹼的特殊塑料成型，有很好的耐用性。
- 震盪器的底部有四個固定式吸盤，可防止震盪器工作時產生移動。
- 有多種震盪平台可更換，並可外加溫箱控制工作溫度。



SH-100AFS 震盪器



SH-100ARCS 震盪器



SH-100AVS 震盪器

震盪器規格：

型號	SH-100AFS	SH-100ARCS	SH-100AVS
震盪方式	旋轉迴擺式	水平往復式	水平圓周式
速度範圍	0 ~ 150 rpm	0 ~ 350 rpm	0 ~ 2500rpm
位移範圍	—	20mm	4.5mm
最大載重	3.5 KG	5.0 KG	1.0 KG (在 2500rpm 時)
定時時間	0 ~ 90 分鐘 or 連續	3 ~ 70 分鐘 or 連續	3 ~ 90 分鐘 or 連續

震盪器 Shaker



SH-50AFS 震盪器



SH-50ARCS 震盪器



翹板搖擺式震盪器



加溫箱配件



震盪器配件

震盪器規格：

型號	SH-50AFS	SH-50ARCS	(研發中)
震盪方式	旋轉迴擺式	水平往復式	翹板搖擺式
速度範圍	0 ~ 150 rpm	0 ~ 350 rpm	0 ~ 150 rpm
位移範圍	—	10mm	30mm
最大載重	2.0 KG	3.0 KG	2.0 KG
定時時間	3 ~ 60 分鐘 or 連續	3 ~ 60 分鐘 or 連續	3 ~ 60 分鐘 or 連續
儀器重量	2.4KG	2.7KG	2.5KG